coway

โคเวย์ เอ็มซี-ซี01 (เพบเบิล) เก้าอี้นวดไฟฟ้า
คู่มือการใช้งาน



This product cannot be used if the voltage is different from that mentioned in the rating plate.
For your safety and proper use of the product, please read this User manual before use.

TH

เรียนลูกค้า Coway

ขอบพระคุณที่ใช้งานเก้าอี้นวด Coway
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดเพื่อการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างเหมาะสม
ท่านสามารถอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ในการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน
ข้อบ่งใช้: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว

วันที่จัดทำเอกสาร 07/11/2025
Rev.0

coway

โคเวย์ เอ็มซี-ซี01 (เพบเบิล) เก้าอี้นวดไฟฟ้า
คู่มือการใช้งาน

IIII โปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

1. ข้อมูลความปลอดภัย 4
2. ชื่อส่วนประกอบ 11
3. ตรวจสอบก่อนใช้งาน 12

IIII ทำความเข้าใจการใช้งานที่ถูกต้องและฟังก์ชันต่างๆ

1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก 14
2. วิธีการใช้งาน 17
3. การเลือกโหมดการนวด 19
4. วิธีการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม 22

IIII เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดและดูแลผลิตภัณฑ์

1. วิธีทำความสะอาด 24

IIII ทำความคุ้นเคยกับข้อมูลนี้ล่วงหน้าเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย


1. การแก้ไขปัญหา 26
2. ข้อมูลจำเพาะ 27

1. ข้อมูลความปลอดภัย


⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

พลังงาน

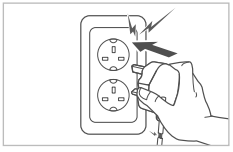


⚠ ห้ามใช้ปลั๊กที่เสียหายหรือใช้เต้ารับที่หลวม

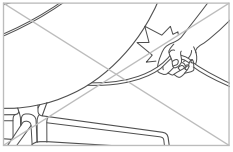


⚠ อย่าดึงปลั๊กไฟขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

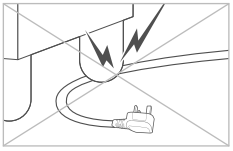


⚠ อย่างอปลั๊กไฟมากเกินไป หรือวางสายไฟไว้ข้างใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมากเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายหรือการผิดรูป

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

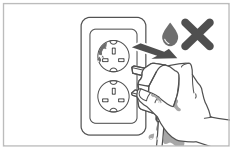


⚠ หากบริเวณที่ต่อปลั๊กไฟสัมผัสกับน้ำ ให้ถอดปลั๊กแล้วเช็ดให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

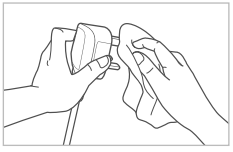


⚠ เช็ดฝุ่น น้ำ ฯลฯ บนขาปลั๊กไฟและบริเวณที่สัมผัสกับขาปลั๊กให้สะอาด

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

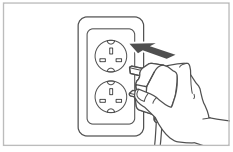


⚠ ทำให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ 220 - 240 V~, 50/60 Hz

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

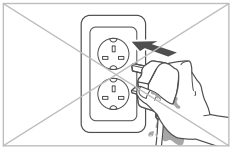


⚠ อย่าจับปลั๊กด้วยมือที่เปียก

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

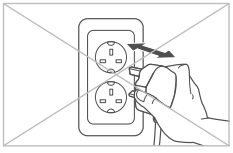


⚠ อย่าเสียบหรือถอดปลั๊กไฟซ้ำ ๆ บ่อยครั้ง

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

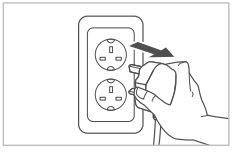

⚠ ทำให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะทำการซ่อมแซม ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์


- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

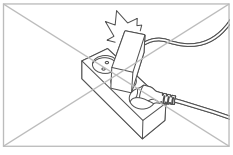

⚠ อย่าต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายเครื่องเข้ากับเต้ารับเดียวกัน ใช้เต้ารับแยกเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เสมอ


- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินกรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

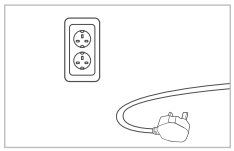


⚠ หากท่านไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้าออก

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

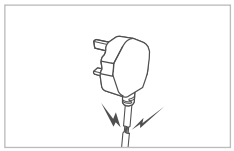


⚠ หากปลั๊กไฟเสียหาย อย่าพยายามเปลี่ยนอะแดปเตอร์ โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

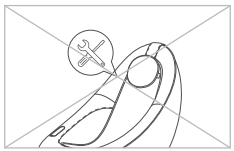


⚠ ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์เองโดยพลการ

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

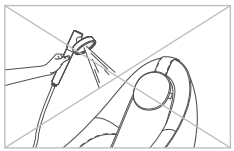


⚠ อย่านำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำหรือฉีดน้ำบนผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

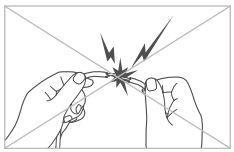


⚠ อย่าต่อหรือดัดแปลงปลั๊กไฟโดยพลการ

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

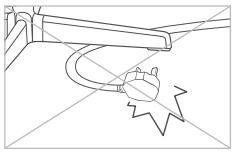


⚠ ระวังอย่าให้ปลั๊กไฟหล่นลงไปข้างใต้ผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

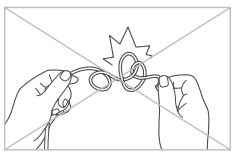

⚠ อย่าทำให้ปลั๊กไฟเสียหาย อย่านำผลิตภัณฑ์ไปไว้ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อน หรือหักงอ ดึง มัด หรือหมุนพันกัน หรือวางวัตถุหนักลงบนผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

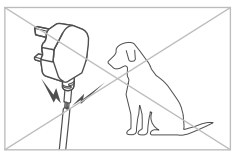

⚠ ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงกัดปลั๊กไฟ


- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

1. ข้อมูลความปลอดภัย

⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ


⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

การติดตั้ง

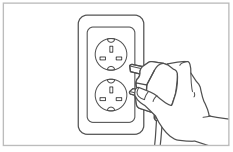


⚠
ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจดูว่าเชื่อมต่อสายไฟอย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

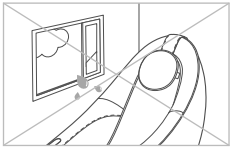


⚠
อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่มีความชื้นสูงมาก มีฝุ่นมาก หรือมีน้ำ (เช่น ฝน) กระเซ็น

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

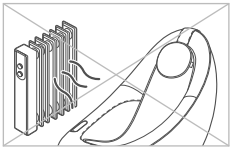

⚠
อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

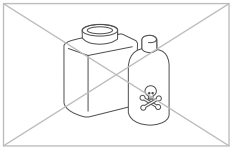


⚠
อย่าใช้หรือเก็บก๊าซหรือวัตถุไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้




⚠
ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่พื้นราบเรียบ

- หากติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ลาดเอียง จะมีความเสี่ยงต่อร่างกายและผลิตภัณฑ์เสียหาย

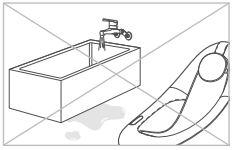

⚠
อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่เปียกหรือชื้น เช่นสระว่ายน้ำหรือห้องน้ำ

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร

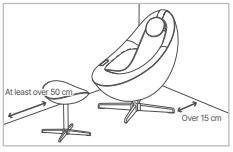


⚠
ติดตั้งส่วนหลังของพนักพิงให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. และให้ด้านหน้าของส่วนที่นวดขาห่างจากประตูอย่างน้อย 50 ซม.



⚠
หลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่าลืมปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

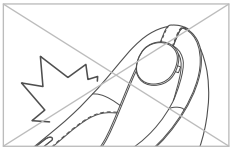


⚠
อย่าใช้แรงมากเกินไปหรือกระแทกกับผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเสียหาย


คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินกรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่เด็ก(เด็กเล็ก) ใช้งาน

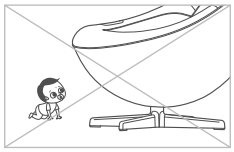

⚠
ห้ามให้เด็ก และผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามลำพัง และเก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็ก

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ

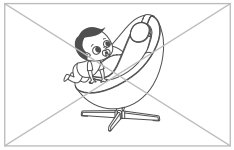


⚠
ควรสอนเด็กไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามลำพัง และไม่ให้ผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารหรือแสดงออกได้ใช้งานรวมถึงควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก

- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ




⚠
ห้ามให้เด็กปีนขึ้นบนเก้าอี้นวด หรือใช้งานเก้าอี้นวดโดยเด็ดขาด

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ

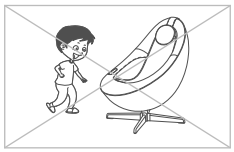

⚠
ห้ามให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด oมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกคว่ำหรือล้มได้


- มีความเสี่ยงที่จะล้มลง

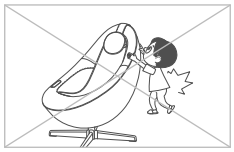

⚠
อย่าทำการโหนเก้าอี้นวด

- มีความเสี่ยงที่จะล้มลง

ในกรณีที่ผู้สูงอายุใช้งาน (กลุ่มเปราะบาง)

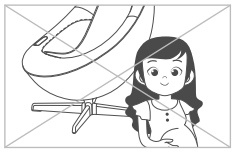


⚠
ผู้ป่วยต่อไปนี้ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้:

- ผู้ที่มีกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือมีอาการกล้ามเนื้อหดตัวเฉียบพลันและมีภาวะกล้ามเนื้อไม่เชื่อมต่อ
- สตรีมีครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกหรือทันทีหลังจากคลอดบุตร



⚠
บุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู้หรือสติปัญญา (รวมถึงเด็ก) ต้องได้รับการกำกับดูแลหรือคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ล้มเหลว

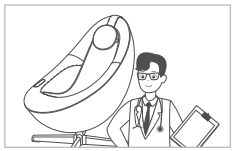

⚠
บุคคลต่อไปนี้ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หลังจากปรึกษาแพทย์อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


- ผู้ที่กำลังรับการรักษาจากแพทย์เนื่องจากอุบัติเหตุความเจ็บป่วย หรือผู้ที่มีร่างกายผิดปกติ
- ผู้ใช้ที่รับหรือได้รับผลกระทบจากการรักษาในโรงพยาบาลระยะยาว

1. ข้อมูลความปลอดภัย

⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ขณะใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป

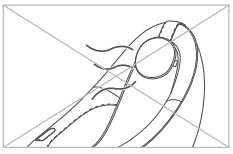


⚠ อย่าใช้ฟังก์ชันการทำความร้อนเป็นเวลานาน

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม้




⚠ หากท่านรู้สึกว่ามีความผิดปกติกับร่างกายระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ (อาการเจ็บ ผื่น ชัก คัน ฯลฯ) ให้หยุดใช้งานทันทีและปรึกษาแพทย์

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือปัญหาสุขภาพ

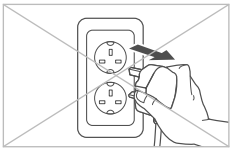


⚠ อย่าถอดปลั๊กไฟในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

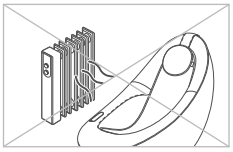


⚠ อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อนหรือสร้างความชื้นไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

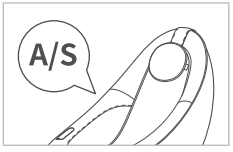


⚠ หากเกิดการขัดข้อง ทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์เปียกน้ำหรือโดนความชื้น ให้ติดต่อศูนย์บริการ

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

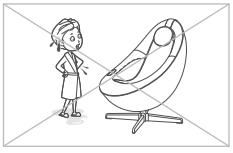


⚠ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่ตัวเปียกหลังจากอาบน้ำ หรือในขณะที่ผมเปียกหลังจากสระผม

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

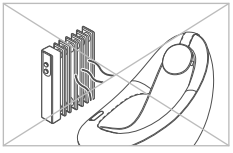

⚠ อย่าวางผ้าห่มไฟฟ้าไว้บนเก้าอี้นวด หรือใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอื่นๆ ร่วมกัน

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

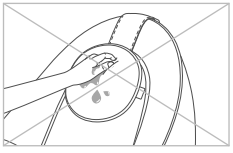


⚠ อย่าจับผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต



⚠ อย่าเคลื่อนย้ายเก้าอี้นวดในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน


- มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

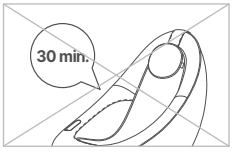

⚠ อย่าใช้งานเก้าอี้นวดติดต่อกันนานเกิน 30 นาทีในแต่ละครั้ง อย่านวดมากเกินไปหรือนวดเฉพาะจุดในร่างกายนานเกินกว่า 5 นาที

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินกรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

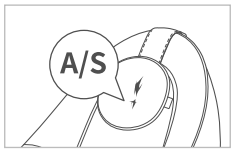

หากผ้าคลุมขาด ให้หยุดใช้งานทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการ

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ




อย่านอนหลับบนเก้าอี้นวด

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ



อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการนวด (เช่น การนอน การกระโดด ฯลฯ)

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

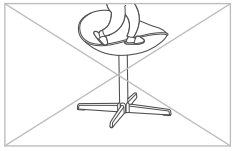


อย่านั่งหรือปีนบนที่วางขา

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย



อย่าใช้มือกดที่ลูกกลิ้งนวดโดยตรงหรือใช้เท้าเหยียบ

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

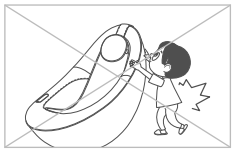


อย่านั่ง ปีน หรือโหนพนักพิงของเก้าอี้นวด

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย



ระหว่างการนวดบริเวณรอบคอ โปรดคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งนวด และหลีกเลี่ยงการใช้แรงนวดมากเกินไป

- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ

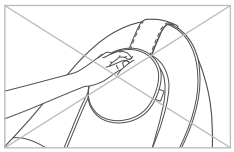


อย่าวางมือไว้ระหว่างลูกกลิ้งนวดโดยตรงในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย



เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่สวมเสื้อผ้าที่บางเกินไป เช่นไม่ใส่เสื้อผ้าหรือสวมเพียงชุดชั้นใน

- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ

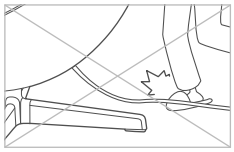

ระวังอย่าให้เท้าเข้าไปติดในผลิตภัณฑ์และปลั๊กไฟ

- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ

1. ข้อมูลความปลอดภัย

⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ


ขณะใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป



⚠ ตำแหน่งนวดบ่าและไหล่อาจจะไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ใช้งาน




⚠ น้ำหนักผู้ใช้ที่แนะนำไม่เกิน 100 กิโลกรัม

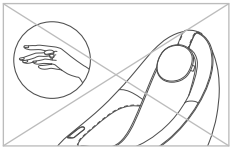

⚠ เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดเครื่องประดับ (กำไล แหวน นาฬิกา ฯลฯ) ก่อนใช้งาน

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

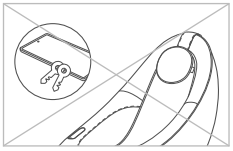


⚠ นำสิ่งของออกจากกระเป๋า (โทรศัพท์ กระเป๋าเงิน กุญแจ ฯลฯ) ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ




⚠ อย่าทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

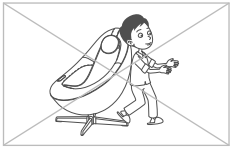


⚠ อย่าพิงเก้าอี้นวด

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

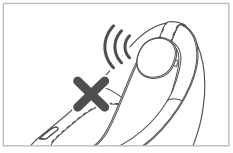

⚠ เมื่อใช้ลำโพง Bluetooth อย่าเปิดเสียงดังเป็นเวลานาน

- อาจมีผลกระทบต่อการได้ยิน

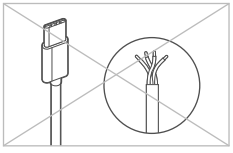

⚠ ใช้สายไฟแบบหุ้มฉนวนเมื่อจะชาร์จอุปกรณ์จากช่องชาร์จ USB


- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือการทำงานล้มเหลว

* สายไฟหุ้มฉนวนหมายถึงสายไฟที่หุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์หรือสายไฟที่หุ้มด้วยทองแดงหรือเหล็กในรูปแบบตาข่ายเพื่อลดสัญญาณรบกวนจากภายนอก

2. ชื่อส่วนประกอบ

ปรับเบาะรองศีรษะด้วยมือ
ท่านสามารถปรับเอนหรือถอดพนักพิงศีรษะได้ตามต้องการ


ภายนอกของผลิตภัณฑ์

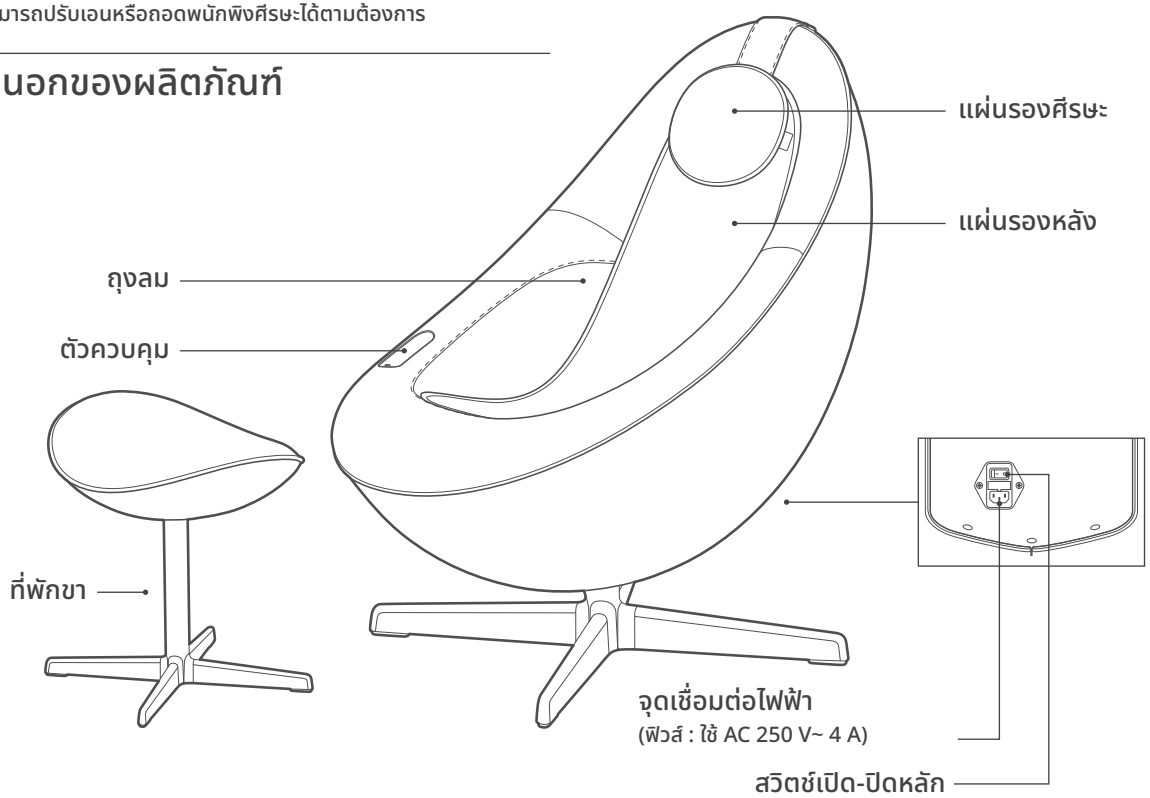


ส่วนประกอบอื่นๆ



คู่มือผู้ใช้

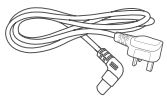

ปลั๊กไฟ

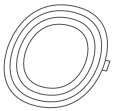

เบาะ

3. ตรวจสอบก่อนใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับไฟฟ้า 220-240 โวลต์~, 50/60 เฮิรตซ์ เท่านั้น กรุณาเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และรองรับไฟฟ้า 220-240 โวลต์~, 50/60 เฮิรตซ์เก้าอี้นวดจะทำงานได้ตามปกติก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้วเท่านั้น

⚠ คำเตือน

ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ที่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์

- **ผู้ป่วยต่อไปนี้ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้:**

① ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าไม่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดอุดตัน เส้นเลือดขอดรุนแรง หรือเส้นเลือดขอดระยะเฉียบพลัน ฯลฯ
② ผู้ที่มีอาการสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่คอแบบเฉียบพลัน
③ บุคคลที่มีกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือมีอาการกล้ามเนื้อหดตัวเฉียบพลันและมีภาวะกล้ามเนื้อไม่เชื่อมต่อ
④ ผู้ที่มีครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกหรือทันทีหลังจากคลอดบุตร
⑤ ผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุหรือโรคในอดีต หรือผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดไปด้านซ้ายหรือขวา
⑥ ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนระดับรุนแรง
⑦ ผู้ที่มีโรคทางลำไส้ระยะเฉียบพลันหรือภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง
⑧ ผู้ที่มีอาการชักรุนแรงหรือโรคทางจิตเวช (ความผิดปกติทางการรับรู้)
⑨ ผู้ที่ใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง
⑩ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าสูญเสียความรู้สึกต่ออุณหภูมิ เนื่องจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดส่วนปลายระดับรุนแรงจากโรคเบาหวาน เป็นต้น
⑪ ผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคกระดูกอักเสบ
⑫ ผู้ที่มีการแสดงออกและการเคลื่อนไหวร่างกายที่จำกัด

- **บุคคลต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์**

① ผู้ที่อาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่นหญิงตั้งครรภ์
② ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติเนื่องจากการอักเสบเฉียบพลันหรืออาการหนาวสั่น
③ ผู้ที่เป็นโรคผิวหนังระยะเฉียบพลัน เนื้องอกมะเร็ง หรือโรคผิวหนังอื่นๆ
④ ผู้ที่กำลังรับการรักษาทางการแพทย์และจำเป็นต้องพักฟื้นร่างกายตามคำแนะนำ
⑤ ผู้ที่รู้สึกถึงความผิดปกติอื่นๆ ของร่างกาย

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังก่อนใช้งาน

- หากท่านมีโรคที่ทำให้ท่านไม่ควรใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดสอบถามแพทย์ของท่าน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ตรวจสอบวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียง
- ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย ให้เริ่มด้วยการการนวดระดับเบา
- ตรวจดูตำแหน่งของปุ่ม “Power” (พลังงาน) ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบระยะเวลาของเซสชันการนวดของผลิตภัณฑ์
- หากผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ฉีกขาดหรือลอกออก เสื้อผ้าหรือผมอาจเข้าไปติดในเก้าอี้นวดและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มิควรใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่ายกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีการกำกับดูแล หรือได้รับคำแนะนำ
- ดูแลอย่าให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีพื้นผิวที่มีความร้อน บุคคลที่อ่อนไหวต่อความร้อนต้องระมัดระวังเมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

ข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน

- หากคุณรู้สึกเจ็บปวดระคายเคือง หรือมีความผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทันทีและไปพบแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงกับส่วนที่ให้ความร้อนและชิ้นส่วนมอเตอร์ที่เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์
- เฝ้าสังเกตระยะเวลาการใช้งานเมื่อทำการนวด
- เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นวดแบบสั่นหรือแผ่นทำความร้อนไฟฟ้าอื่น
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์พร้อมกันมากกว่า 2 คน
- ระวังอย่าทำให้บริเวณนวดของผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์เสริมเสียหาย (กิ๊บติดผม สร้อยคอ นาฬิกาข้อมือ กำไล แหวน ฯลฯ)

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินกรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

⚠ ขข้อควรระวังเมื่อเกิดความขัดข้อง

หากเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ กรุณาอย่าถอดชิ้นส่วนหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมหรืออุบัติเหตุ ได้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้ากรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานเพื่อดำเนินการเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เรายินดีให้บริการและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

⚠ ข้อควรระวัง

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

- **โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากอาการข้างเคียงต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้**

① แผลถลอก แผลฟกช้ำ แผลเลือดคั่ง แผลถูกแทง แผลมีดบาด ฯลฯ
② การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท กระดูกสันหลัง ฯลฯ เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์มากเกินไปหรือความแรงเกินไป
③ โรคผิวหนังและแผลไหม้ ฯลฯ
④ กระดูกหักและข้อเคลื่อน ข้อแพลง ฯลฯ
⑤ ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ/ระบบย่อยอาหาร และภาวะหายใจลำบาก ฯลฯ

ตรวจสอบก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

- ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุ ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงอยู่รอบๆ ผลิตภัณฑ์
- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติหรือไม่ โดยการกดสวิตช์ทั้งหมดตามคู่มือฉบับนี้

Coway Thailand ไม่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือผู้ใช้หรือละเลยข้อควรระวังในการใช้งาน
- กรณีที่ผลิตภัณฑ์ ได้รับการซ่อมหรือดัดแปลงโดยบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ Coway บริษัทคู่ค้าหรือช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ
- หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าผ่า ฯลฯ)


กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ห้ามเคลื่อนย้ายเองโดยพลการและกรุณาติดต่อศูนย์บริการ Coway

- อาจทำให้เกิดความเสียหายเช่นทำให้พื้นเป็นรอย

1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก

ตัวควบคุม

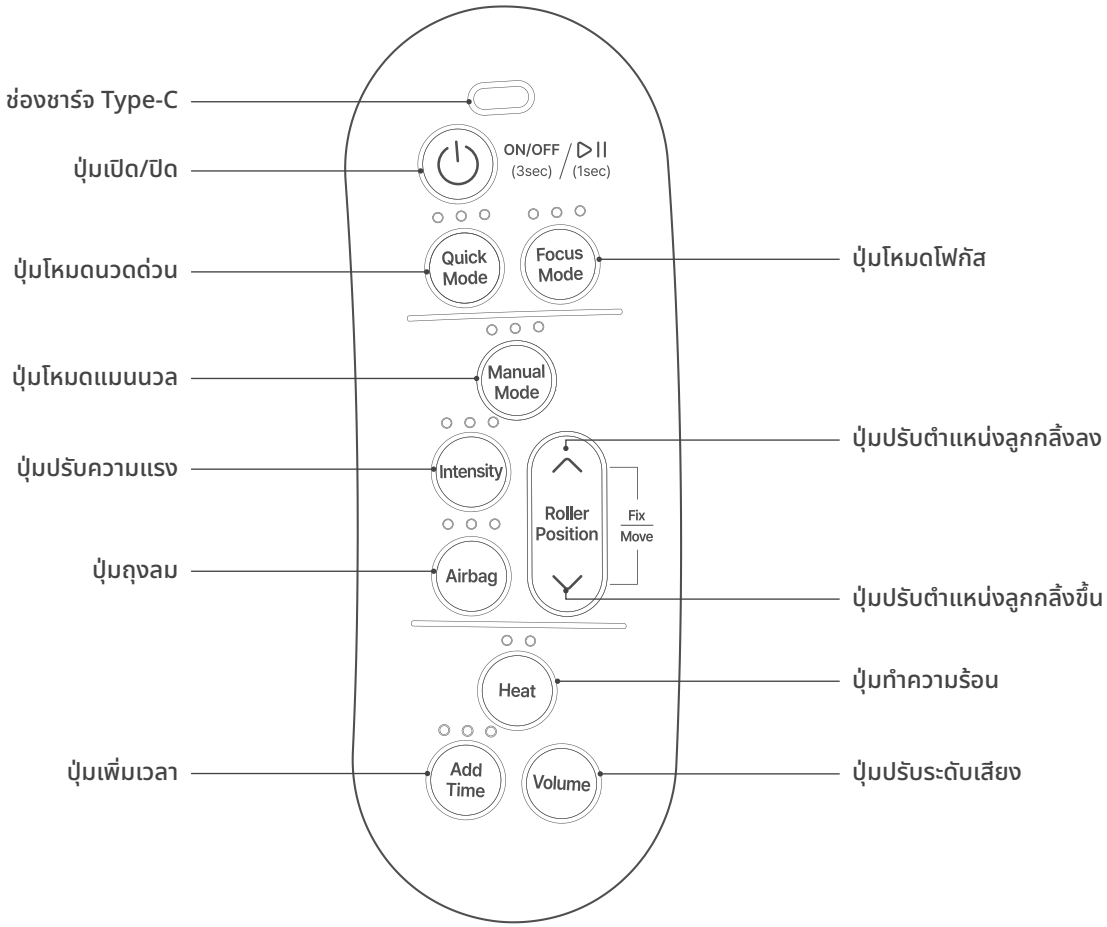


ตัวควบคุม




ปุ่มเปิด/ปิด

- กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้ประมาณ **3 วินาที** เพื่อเปิดหรือปิดพลังงานของเก้าอี้นวด หากท่านปิดพลังงาน ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดจะหยุด และเก้าอี้และโมดูลการนวดจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเริ่มแรก
- ในการหยุดการนวดชั่วคราว ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที หากท่านกดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ประมาณ 1 วินาทีในสภาวะหยุดชั่วคราว การนวดจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้ง

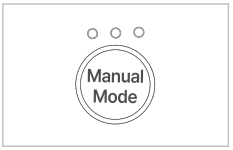

ปุ่มโหมดแมนนวล

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดนวด
  - ● ○ ○ การเคาะ
  - ○ ● ○ การกดจุด
  - ○ ○ ● การรีดเส้น
  - ● ● ● ผสม
  - ○ ● ● การถู

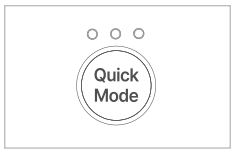


ปุ่มโหมดนวดด่วน

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดนวดอัตโนมัติ 3 โหมด
  - ● ○ ○ พิเศษ 1 - โหมด Good Morning
  - ○ ● ○ พิเศษ 2 - โหมด Good day
  - ○ ○ ● พิเศษ 3 - โหมด Good night



ปุ่มปรับความแรง

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระดับความแรง
- ความแรงตั้งต้นในการนวดคือระดับ 1 และหากท่านกดปุ่มนี้ ระดับความแรงจะเปลี่ยนไปตามลำดับ 1 > 2 > 3 > 1
  - ● ○ ○ ความแรง 1
  - ● ● ○ ความแรง 2
  - ● ● ● ความแรง 3

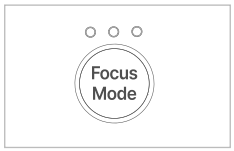

ปุ่มโหมดโฟกัส

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดนวดอัตโนมัติ 3 โหมด
  - ● ○ ○ ส่วนที่ 1 - เน้นที่คอและบ่าไหล่
  - ○ ● ○ ส่วนที่ 2 - เน้นที่หลังและเอว
  - ○ ○ ● ส่วนที่ 3 - เน้นที่กระดูกเชิงกราน




ปุ่มถุงลม

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระดับความแรงของถุงลม
- ความแรงตั้งต้นของถุงลมคือระดับ 1 และหากท่านกดปุ่มนี้ ระดับความแรงจะเปลี่ยนไปตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1
  - ● ○ ○ ความแรง 1
  - ● ● ○ ความแรง 2
  - ● ● ● ความแรง 3
  - ○ ○ ○ ปิด

1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก

ตัวควบคุม

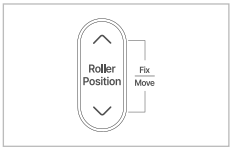

ปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้น/ลง/อยู่กับที่/ขยับ


- ท่านสามารถขยับหรือล็อก/ยกเลิกตำแหน่งของลูกกลิ้งนวดได้
- ท่านสามารถปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งนวดได้โดยการกดปุ่มตำแหน่งลูกกลิ้ง ‘ขึ้น’ หรือ ‘ลง’ และท่านสามารถล็อกลูกกลิ้งนวดอยู่กับที่ได้โดยการกดปุ่ม ‘ขึ้น’ และ ‘ลง’ พร้อมกัน
- หากท่านกดปุ่ม ‘ขึ้น’ และ ‘ลง’ พร้อมกัน หรือเปลี่ยนโหมดนวดในขณะที่ลูกกลิ้งนวดถูกล็อกอยู่กับที่ การล็อกลูกกลิ้งนวดจะถูกยกเลิก



ปุ่มเพิ่มเวลา

- กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มเวลานวด
- ระยะเวลานวดตั้งต้นคือ 20 นาที ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้จะเพิ่มเวลานวด 20 นาที (ระยะเวลานวดสูงสุด 60 นาที)

● ○ ○ 20 นาที
● ● ○ 40 นาที
● ● ● 60 นาที

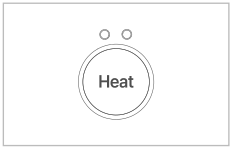


ปุ่มทำความร้อน

- เปิดหรือปิดพลังงานของฟังก์ชันการทำความร้อน
- สภาวะตั้งต้นของการทำความร้อนคือปิด และหากท่านกดปุ่มนี้ เครื่องจะทำงานตามลำดับ ระดับ 1 > ระดับ 2 > ปิด > ระดับ 1

● ○ ระดับ 1
● ● ระดับ 2
○ ○ ปิด

⚠ ระวัง:
มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม้หากใช้งานฟังก์ชันการทำความร้อนเป็นเวลานาน

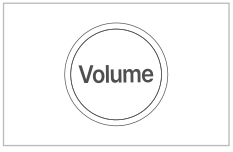


ปุ่มปรับระดับเสียง


- กดปุ่มนี้เพื่อปรับระดับเสียง
- ระดับเสียงตั้งต้นคือระดับ 1 และหากท่านกดปุ่มนี้ ระดับเสียงจะเปลี่ยนไปตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1

2. วิธีการใช้งาน


01. เปิดเครื่อง

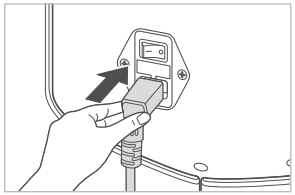

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเก้าอี้นวด

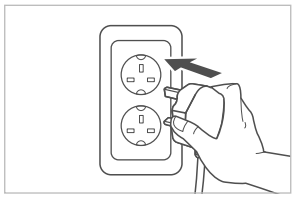


2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

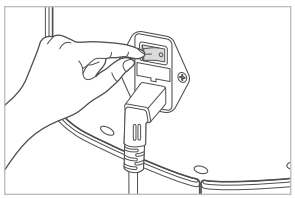

3. เปิดสวิตช์ไฟหลักที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

2. วิธีการใช้งาน


01. นั่งบนเก้าอี้นวดในท่าหลังตรง

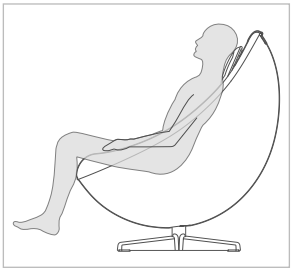

วิธีการนั่งบนเก้าอี้นวดอย่างถูกต้อง
ขยับสะโพกและหลังส่วนล่างให้ชิดกับ
เก้าอี้นวดให้มากที่สุดแล้วนั่งลง


- หลีกเลี่ยงการลุกออกจากเก้าอี้นวดอย่างรุนแรงขณะที่เก้าอี้กำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายและเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้
- เมื่อใช้งานลำโพง Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงอย่างเหมาะสม ระดับเสียงที่ดังมากอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

02. กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนตัวควบคุม

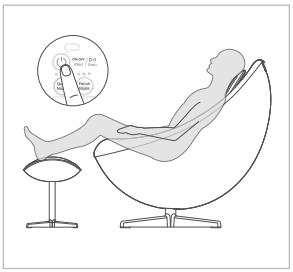

- หากท่านกดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะเปิด และ ไฟ LED ทั้งหมดยกเว้นไฟ LED พลังงานจะกะพริบสองครั้ง
- หากท่านเปิดเครื่อง ไฟ LED พลังงานจะเปิดขึ้นเป็นสีเขียว และอุปกรณ์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- หลังจากนี้ หากท่านกดเลือกโหมดนวดที่ต้องการ ไฟ LED พลังงานจะสว่างขึ้นเป็นสีขาว และการนวดจะเริ่มต้นหลังจากตรวจจับไหล่
- หากตรวจไม่พบไหล่ ลูกกลิ้งนวดจะขยับไปที่ด้านบนและการนวดจะเริ่มขึ้น
- เมื่อท่านเปิดเครื่อง ลูกกลิ้งนวดอาจขยับเล็กน้อย
- พอร์ทชาร์จ type-C นั้นสามารถใช้งานได้เมื่อเปิดเครื่องเท่านั้น


03. การปรับความสูงของที่พักขา

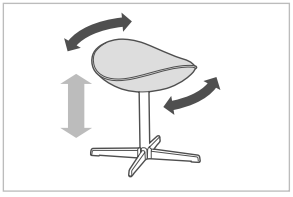

- หมุนที่นั่งของที่พักขาไปทั้งสองทิศทางเพื่อปรับความสูง

3. การเลือกโหมดการนวด

01. โหมดนวดด่วน

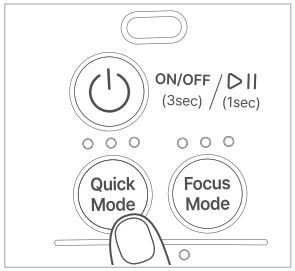


โหมดนวดด่วนจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยการผสมผสานโหมดนวดต่างๆ เช่นโหมดทุบและฟังก์ชันการนวดด้วยถุงลม กดปุ่มโหมดนวดด่วนบนตัวควบคุมเพื่อเลือกคอร์สการนวดได้ 3 แบบ

- ● ○ ○ พิเศษ 1 - โหมด Good Morning
- ○ ● ○ พิเศษ 2 - โหมด Good Day
- ○ ○ ● พิเศษ 3 - โหมด Good Night

• หากท่านกดปุ่มนี้ คอร์สจะถูกเลือกตามลำดับ โหมด Good Morning > โหมด Good day > โหมด Good Night > โหมด Good Morning
• ในโหมดนวดด่วน เก้าอี้นวดจะทำความร้อนที่ระดับ 2 หากท่านไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันทำความร้อน ให้กดปุ่มทำความร้อนเพื่อปิดฟังก์ชันทำความร้อน

02. โหมดโฟกัส

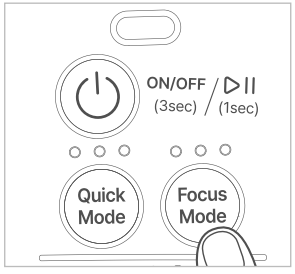


โหมดโฟกัสจะนวดบริเวณเฉพาะอย่างหนักหน่วงโดยการผสมผสานโหมดนวดต่างๆ เช่นโหมดทุบและฟังก์ชันการนวดด้วยถุงลม กดปุ่มโหมดโฟกัสบนตัวควบคุมเพื่อเลือกคอร์สการนวดได้ 3 แบบ

- ● ○ ○ ส่วนที่ 1 - คอและบ่าไหล่
- ○ ● ○ ส่วนที่ 2 - หลังและเอว
- ○ ○ ● ส่วนที่ 3 - กระดูกเชิงกราน

• หากท่านกดปุ่มนี้ คอร์สจะถูกเลือกตามลำดับ คอและบ่าไหล่ > หลังและเอว > กระดูกเชิงกราน > คอและบ่าไหล่

3. การเลือกโหมดการนวด

03. โหมดแมนนวล

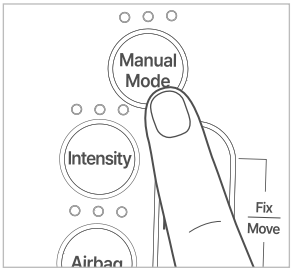

ในโหมดแมนนวล โมดูลจะขยับขึ้นและลงซ้ำๆ และผู้ใช้จะเลือกโหมดการนวดด้วยตนเอง กดปุ่มโหมดแมนนวลบนแผงควบคุมเพื่อเลือก 5 คอร์ส

- ● ○ ○ การทุบ
- ○ ● ○ การกดจุด
- ○ ○ ● การนวดคลึง
- ● ● ● ผสม
- ○ ● ● การถู

• หากท่านกดปุ่มนี้ คอร์สจะถูกเลือกตามลำดับ ทุบ > กดจุด > นวดคลึง > ผสม > ถู

การวิเคราะห์รูปร่างร่างกาย

- เปิดเครื่องและวิเคราะห์รูปร่างของร่างกายเมื่อเริ่มทำงานครั้งแรก
- หากท่านต้องการจะนวดทันทีโดยไม่ต้องวิเคราะห์รูปร่างของร่างกาย ให้กดปุ่มระดับเสียงค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีในขณะที่กำลังวิเคราะห์รูปร่างของร่างกาย


การนวดหยุดชั่วคราว/เริ่มใหม่

- ในการหยุดการนวดชั่วคราว ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
  หากท่านกดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ประมาณ 1 วินาทีในขณะที่เครื่องหยุดชั่วคราว การนวดจะเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้ง
- เมื่อหยุดชั่วคราว ไฟ LED จะกะพริบ
- ฟังก์ชันการนวดจะหยุดลงหลังจากการนวดชั่วคราวผ่านไป 10 นาที

วิธีการหยุดการนวด


- ในการหยุดการนวด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
- ระยะเวลาสูงสุดของการนวดแต่ละครั้งคือ 60 นาที และเครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที
- เมื่อการนวดหยุดลง โมดูลการนวดจะกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มแรก
- เมื่อการนวดสิ้นสุดลง ไฟ LED จะสว่างขึ้นเป็นสีแดง

04. การปรับความแรงในการนวด

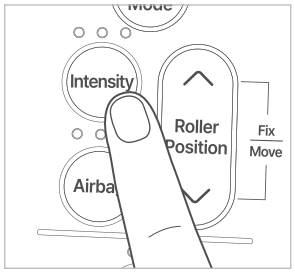


สามารถปรับระดับความแรงของลูกกลิ้งนวดได้
- หากกดปุ่มปรับความแรงบนแผงควบคุม ความแรงจะถูกเลือกตามลำดับ 1 > 2 > 3 > 1
- ท่านสามารถปรับความแรงในการนวดระหว่างการนวดพิเศษ การนวดเฉพาะพื้นที่ หรือการนวดแบบแมนนวล

05. การปรับความแรงของถุงลม

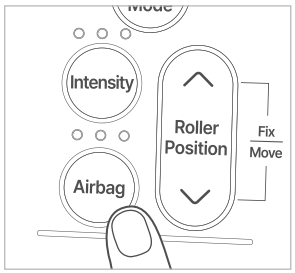

สามารถปรับความแรงของถุงลมได้
หากกดปุ่มถุงลมบนตัวควบคุม ความแรงจะถูกเลือกตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1
- ท่านสามารถปรับระดับความแรงของถุงลมระหว่างการนวดพิเศษและการนวดเฉพาะพื้นที่ได้


06. การปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งนวด

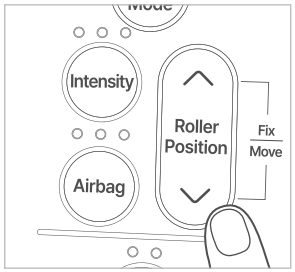

1. หากท่านกดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้นและลงพร้อมกัน หรือกดเพียงปุ่มเดียวระหว่างการนวด ตำแหน่งของลูกบอลจะล็อกอยู่กับที่
2. ในขณะที่กดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้นระหว่างการนวดแบบแรง (ลูกกลิ้งนวดล็อกอยู่กับที่) โมดูลการนวดจะขยับขึ้นบน
3. ในขณะที่กดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งลงระหว่างการนวดแบบแรง (ลูกกลิ้งนวดล็อกอยู่กับที่) โมดูลการนวดจะขยับลงล่าง
4. เมื่อการนวดแบบแรงทำงานในโหมดการนวดพิเศษหรือโหมดโฟกัส การนวดจะทำซ้ำๆ ที่ตำแหน่งดังกล่าว
5. เมื่อการนวดแบบแรงทำงานในโหมดแมนนวล โหมดแมนนวลที่เลือกจะทำงานซ้ำๆ ที่ตำแหน่งดังกล่าว
6. ระหว่างการนวดแบบแรง (ลูกกลิ้งนวดล็อกอยู่กับที่) ให้กดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้นและลงพร้อมกันเพื่อกลับไปสู่โหมดนวดก่อนหน้า
7. หากเลือกโปรแกรมนวดเฉพาะจุดหรือโปรแกรมนวดเข้มข้นเฉพาะส่วน ระบบนวดที่เลือกจะทำงาน และลูกกลิ้งนวดจะถูกปลดล็อค

4. วิธีการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม

07. การเพิ่มเวลา

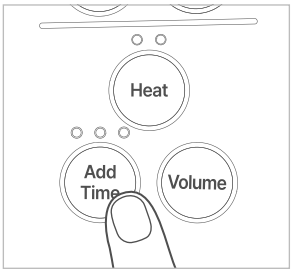


กดปุ่มเพิ่มเวลา (Add Time) เพื่อเพิ่มเวลานวด
ระยะเวลานวดตั้งต้นคือ 20 นาที ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้จะเพิ่มระยะเวลานวด 20 นาที

- ● ○ ○ 20 นาที
- ● ● ○ 40 นาที
- ● ● ● 60 นาที

• ระยะเวลาสูงสุดของการนวดแต่ละครั้งคือ 60 นาที และพลังงานจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที

08. การใช้ฟังก์ชันทำความร้อน

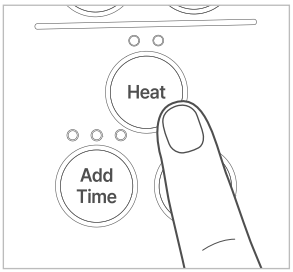


เปิดหรือปิดพลังงานของฟังก์ชันทำความร้อน
หากกดปุ่มความร้อนบนตัวควบคุม ความแรงจะถูกเลือกตามลำดับ 1 > 2 > ปิด > 1

- ● ○ ความร้อนระดับ 1
- ● ● ความร้อนระดับ 2
- ○ ○ ปิด

• ในโหมดนวดด่วน เก้าอี้จะทำความร้อนที่ระดับ 2 หากท่านไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันการทำความร้อน ให้กดปุ่มการทำความร้อนเพื่อปิดฟังก์ชันการทำความร้อน


* ระวัง: มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม้หากใช้งานฟังก์ชันทำความร้อนเป็นเวลานาน

09. การตั้งค่าระดับเสียง

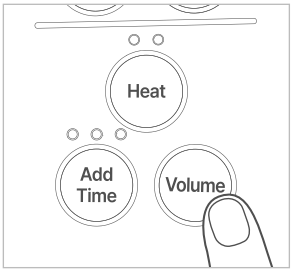


ปรับระดับเสียงของเสียงพูดแนะนำหรือปิดเสียง
หากกดปุ่มระดับเสียงบนตัวควบคุม ระดับเสียงจะทำงานตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1

10. การปิดพลังงาน

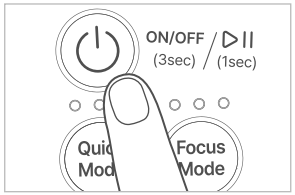

กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนตัวควบคุมค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
แต่ละส่วนของเก้าอี้นวดและเครื่องนวดจะย้ายกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น
เมื่อการนวดสิ้นสุดลง ไฟ LED พลังงานจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง

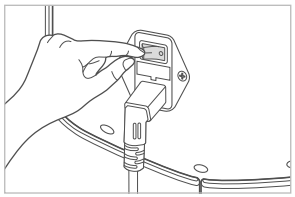

ปิดสวิตช์พลังงานหลักที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

11. การใช้งานลำโพง Bluetooth


ในการใช้งานลำโพง ให้เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ผ่าน Bluetooth

- หากท่านต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับผลิตภัณฑ์นี้ผ่าน Bluetooth โปรดค้นหา
  'TH_COWAY_MC-C01_000001 (หมายเลขซีเรียล)'. (รหัสผ่าน: 9999)
- หากอุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง Bluetooth ของเก้าอี้นวด
- ลำโพงบลูทูธอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์บางรุ่นได้

1. วิธีทำความสะอาด

- อย่าลืมถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาด
- อย่านำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำหรือฉีดน้ำบนผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้สารละลายอินทรีย์ (ทินเนอร์ ฯลฯ) น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคลอรีนหรือวัสดุผงขัดเพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์


วิธีทำความสะอาดตัวเครื่อง

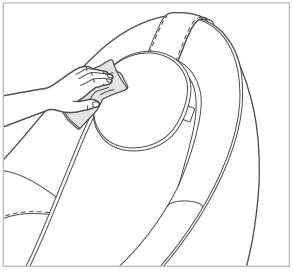

เช็ดภายนอกและผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง

- เมื่อพบคราบสกปรก ให้นำผ้าชุดน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดสิ่งสกปรกออก
- อย่าลืมเช็ดน้ำที่หลงเหลือออกให้หมด
- อย่านำผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ไปซักในเครื่องซักผ้า อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่ารีดผ้าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยเตารีด อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

วิธีทำความสะอาดตัวควบคุม

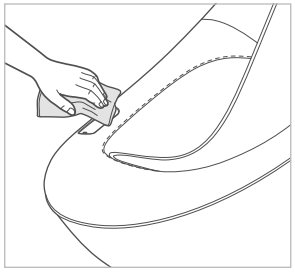

เช็ดแผงควบคุมด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง

- เมื่อพบคราบสกปรก ให้นำผ้าชุดน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดสิ่งสกปรกออก
- อย่าลืมเช็ดน้ำที่หลงเหลือออกให้หมด
- ระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องชาร์จ USB

1. การแก้ไขปัญหา

อาการ	การตรวจสอบ	วิธีการแก้ไข
เสียงดัง	• เกิดเสียงดังในขณะที่ฟังก์ชันนวดด้วยถุงลมกำลังทำงาน • เสียงเฟืองของมอเตอร์ดังเมื่อระบบนวดทำงาน • เสียงสั่นเมื่อนวดแบบเคาะ • เสียงสั่นในขณะที่ลูกกลิ้งนวดเสียดสีกัน	เป็นเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานปกติของผลิตภัณฑ์
พลังงานไม่เข้าผลิตภัณฑ์	ไม่ได้เปิดสวิตช์พลังงานที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์	ให้เปิดสวิตช์พลังงานที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
	เสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไม่แน่น	เสียบปลั๊กพลังงานเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้อง
	ปลั๊กไฟเสียหาย	ติดต่อ Call Center
	เสียบปลั๊กพลังงานไม่ดี	ติดต่อ Call Center
	ยังไม่ได้กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนแผงควบคุม	กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนแผงควบคุม
ผลิตภัณฑ์หยุดกะทันหันในระหว่างการนวด	ปิดสวิตช์พลังงานที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วรอประมาณ 1 นาที จากนั้นให้เปิดสวิตช์พลังงานอีกครั้ง กดปุ่มพลังงานบนแผงควบคุมค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดพลังงาน จากนั้นให้กดปุ่มพลังงานค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้งเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์	หากกดปุ่มพลังงานหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นแล้ว และผลิตภัณฑ์ยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องให้หยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กพลังงานและติดต่อ Call Center
	ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดนวดใดก็ตาม พลังงานจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานเก้าอี้นวดเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง	กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) เพื่อเริ่มต้นใหม่
ลูกกลิ้งนวดหยุดทำงานกะทันหันในระหว่างการนวด	ท่านให้แรงกับลูกกลิ้งนวดมากเกินไปหรือไม่	โปรดหันร่างกายเล็กน้อย หากผลิตภัณฑ์ทำงานตามปกติ นี่แสดงว่าไม่ใช่ความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ * หากผู้ใช้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กก. ขึ้นไปใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดระวัง เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์นี้ได้
ฟังก์ชันเอนพนักพิงไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางรอบๆ ผลิตภัณฑ์หรือไม่	เว้นระยะห่างหลังพนักพิงหลังให้เพียงพอเพื่อให้เอนพนักพิงได้
ในระหว่างผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ลูกกลิ้งนวดติดอยู่กับผ้าด้านในหรือลูกกลิ้งเด้งกลับ	แรงเสียดทานระหว่างลูกกลิ้งนวดและเบาะนั่ง	ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติของเครื่อง เนื่องจากเป็นอาการชั่วคราวที่เกิดจากการทำงานของลูกกลิ้งนวดระหว่างการนวด
ถุงลมไม่ทำงาน	ตรวจดูว่าไฟ LED ความแรงของถุงลมเปิดอยู่หรือไม่	ตรวจดูว่าไฟ LED ความแรงของถุงลมเปิดอยู่หรือไม่ การทำงานของถุงลมนั้นรวมอยู่ในการทำงานนวด และถุงลมจะไม่ทำงานทันทีหลังจากกดปุ่มถุงลม

2. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์		โคเวย์ เอ็มซี-ซี01 (เพบเบิล) เก้าอี้นวดไฟฟ้า
ชื่อรุ่น		MC-C01 (Pebble)
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด		220 - 240 V~, 50/60 Hz
การใช้พลังงานไฟฟ้า		77 W
ขนาด	ตอนตั้งขึ้น	1,015 มม. (ก) X 735 มม. (ล) X 1,120 มม. (ส)
	ตอนปรับลง	1,120 มม. (ก) X 735 มม. (ล) X 970 มม. (ส)
น้ำหนัก		ผลิตภัณฑ์: 45.5 กก, ที่พักขา: 4.5 กก.
USB		DC 5 V 3 A
ผู้จัดจำหน่าย		COWAY (THAILAND) CO., LTD.

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

Dear Coway customers

Thank you for using the Coway Massage Chair

Please read this user manual carefully for the correct use maintenance of the product.

You can refer to the user manual to troubleshoot product issues while using it

Intended use: Helps temporarily relax specific muscles and help increase blood circulation temporary.

coway

Massage Chair MC-C01 (Pebble)
User Manual

IIII Please check before use!

1. Safety information 3
2. Part name 10
3. Check before use 11

IIII Understand the correct usage and functions.

1. Controller and main functions 13
2. How to use 16
3. Massage mode selection 18
4. How to use additional functions 21

IIII Learn how to clean and manage the product.

1. How to clean 23

IIII Familiarize yourself with information in advance for safe use.


1. Troubleshooting 25
2. Specification 26

1. Safety information


⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


Power

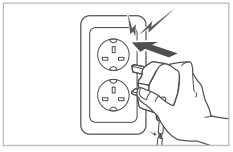


⚠
Do not use a damaged power plug or loose sockets.

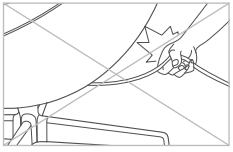


⚠
Do not pull on the power plug to move the product.
- There is a risk of electric shock or fire.

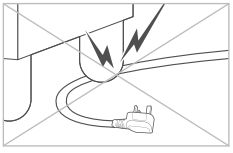


⚠
Do not bend the power plug excessively or put it under a heavy object to avoid damage deformation.damage orderformation.
- There is a risk of electric shock or fire.

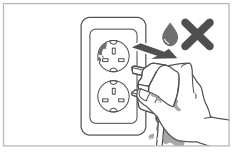


⚠
When the power area comes into contact with water, unplug the power plug and completely dry it prior to use.
- There is a risk of electric shock or fire.

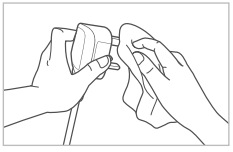


⚠
Completely wipe off dust, water, etc., on the power plug's pins and areas of contact with the pins.
- There is a risk of electric shock or fire.

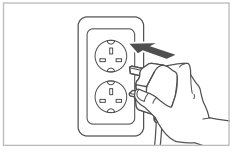


⚠
Be sure to insert the power plug into a 220 - 240 V~, 50/60 Hz outlet.
- There is a risk of electric shock or fire.

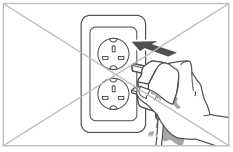


⚠
Do not touch the power plug with wet hands.
- There is a risk of electric shock or fire.

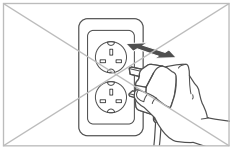

⚠
Do not plug or unplug the power plug repeatedly.
- There is a risk of electric shock or fire.

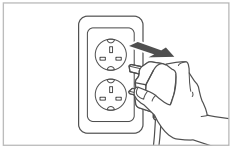


⚠
Be sure to unplug the power cord while repairing or inspecting the product or changing its parts.
- There is a risk of electric shock or fire.

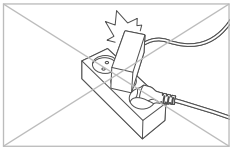


⚠
Do not connect multiple electronic devices to one power outlet. Always use a separate outlet for the product.
- There is a risk of electric shock or fire.

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

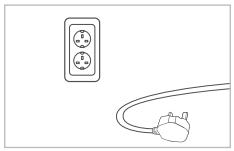


If you don't use it for a long time, then disconnect the power adapter.

- There is a risk of electric shock or fire.

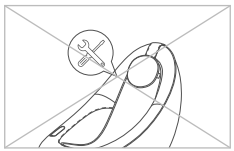


Never arbitrarily disassemble, repair, or remodel the product.

- There is a risk of electric shock or fire.

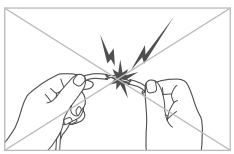


Do not arbitrarily connect or modify the power plug.

- There is a risk of electric shock or fire.

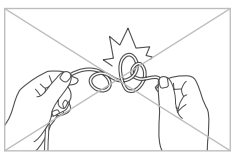


Do not damage the power plug. Do not bring the product close to a heating device, or excessively bend, pull, tie, or twist it, or place a heavy object on the product.

- There is a risk of electric shock or fire.

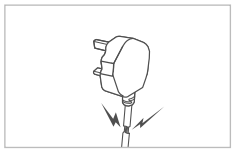


If the power plug is damaged, do not attempt to replace the plug. Instead, contact the service center to replace it.

- There is a risk of electric shock or fire.

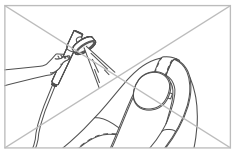


Do not immerse the product in water or spray water over it.

- There is a risk of electric shock or fire.

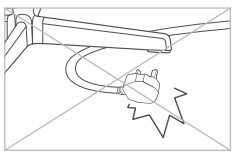

Be careful not to let the power plug fall under the product.

- There is a risk of electric shock or fire.

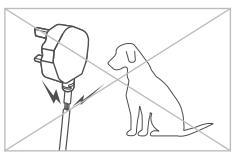

Be careful not to let pets bite the power plug.


- There is a risk of electric shock or fire.

1. Safety information


⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


Installation

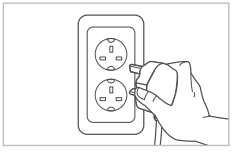


⚠
Before using the product, check if the power is securely connected.
- There is a risk of electric shock or fire.

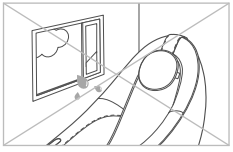


⚠
Do not install the product in a location that is highly humid, dusty, or exposed to splashes of water (rain).
- There is a risk of electric shock or fire.

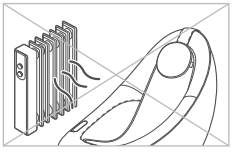


⚠
Do not install the product near an electric heating device.
- There is a risk of electric shock or fire.

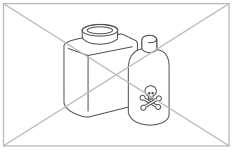


⚠
Do not use or store flammable gas or substance near the product.
- There is a risk of fire.

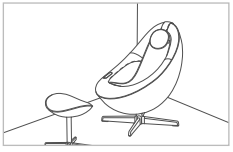

⚠
Install the product in a place where the floor is flat.
- If the product is installed on a tilted surface, there is a risk of bodily harm or product damage.

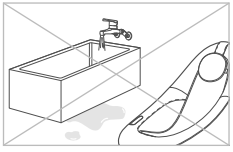


⚠
Do not install the product in a wet or humid place such as a swimming pool or bathroom.
- There is a risk of electric shock and short circuit.

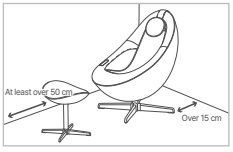

⚠
Install the rear part of the backrest at least 15 cm away from the wall and the front part of the leg massage part at leat 50 cm away from the door.




⚠
After using the product, be sure to turn off the power button and unplug the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.

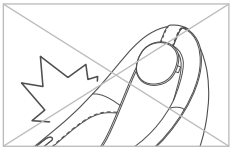


⚠
Do not apply excessive force or shock on the product.
- There is a risk of product damage.

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

During use by children (infants)

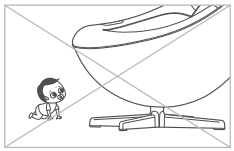


⚠
Be careful not to let children or pets get under the chair, into the rear part, or the leg control part.
- There is a risk of injury.

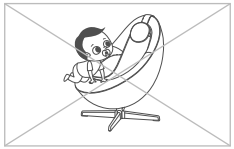


⚠
Instruct children, or people who cannot express themselves not to use the product alone.
Also, keep it out of reach of children.
- There is a risk of bodily harm.



⚠
Please do not allow children to climb on or use the massage chair.
- There is a risk of injury.

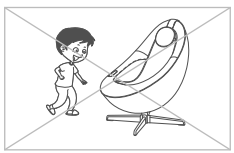


⚠
Children must not play with the appliance.
- There is a risk of rollover.

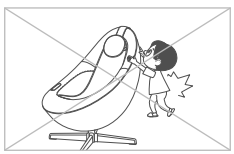

⚠
Do not cling to the device.
- There is a risk of rollover.


During use by elderly people (vulnerable group)

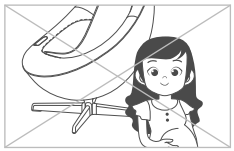

⚠
The following patients shall not use the product:
- People with sprain or symptoms of sudden contraction and disconnection of muscle.
- Pregnant women in early pregnancy or immediately after giving birth.



⚠
A person who lacks physical, sensory, or mental abilities (including children) need supervision or instruction when using the product.
- There is a risk of bodily harm and product failure.

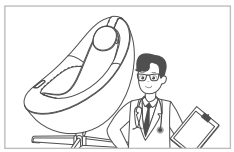

⚠
The following people should use the product after consulting a doctor.
An accident may occur.
- Those who receive treatment from a doctor due to an accident or illness, or who have something wrong with the body
- Users who have long-term hospital treatment or aftereffect

1. Safety information

⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.

During use by general users




⚠ Do not use the heating function for a long time.

- There is a risk of burn.




⚠ If you feel something wrong with your body while using the product (pain, rash, seizure, itching, etc.), stop using it immediately and consult a doctor.

- There is a risk of bodily harm and health problem.

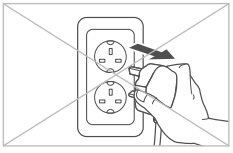


⚠ Do not pull out the power forcibly while the product is operating.

- There is a risk of electric shock or fire.

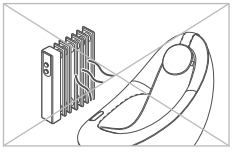


⚠ Do not place any appliance that generates heat or moisture near the product.

- There is a risk of electric shock or fire.

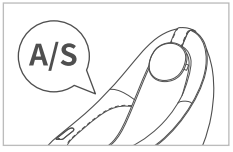


⚠ In case of product failure, malfunction, product immersion or exposure to moisture, contact the service center.

- There is a risk of fire.

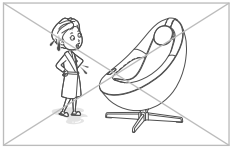


⚠ Do not use the product while your body is wet after taking a shower, or while your hair is wet after washing your hair.

- There is a risk of fire.

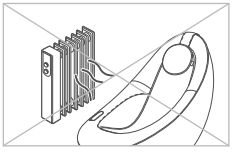


⚠ Do not place an electric blanket over the massage chair or use other heating devices together.

- There is a risk of electric shock or fire.

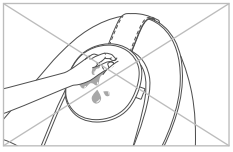


⚠ Do not touch the product with wet hands.

- There is a risk of electric shock.

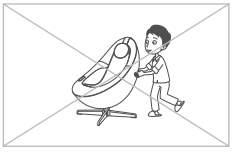

⚠ Do not move the massage chair while the product is operating.


- There is a risk of bodily harm, accident, and product failure.

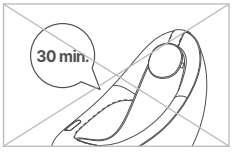

⚠ Do not use the massage chair for more than 30 minutes per time. Do not massage too much or massage a specific body area for more than 5 minutes.

- There is a risk of bodily harm and accident.

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

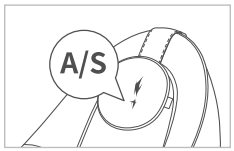

If the sheet is torn, stop using it immediately and contact the service center.

- There is a risk of bodily harm and accident.



Do not use the product other than massage purpose.
[sleeping, jumping & etc]

- There is a risk of bodily harm and accident.




Do not press the massage rollers directly with your hand or step on it with your feet.

- There is a risk of bodily harm and accident.



When massaging the area around your neck, pay attention to the movement of the massage rollers and refrain from massage with excessive force.

- There is a risk of bodily harm.

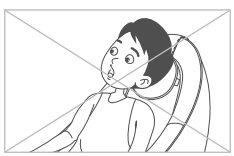


When using the product, do not use the product while wearing clothes that are too thin, such as bare skin or underwear.

- There is a risk of bodily harm.




Do not sleep in the massage chair.

- There is a risk of bodily harm and accident.

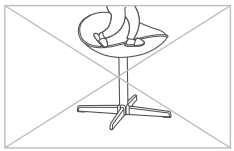


Do not sit or climb on the leg rest.

- There is a risk of bodily harm and product failure.

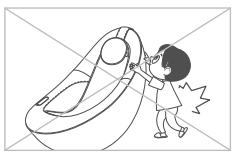


Do not sit on, climb on, or cling to the backrest of the massage chair.

- There is a risk of bodily harm and product failure.

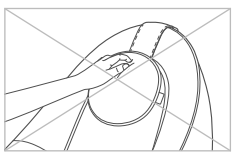

Do not place your hand directly between the massage rollers while the product is operating.

- There is a risk of bodily harm and product failure.

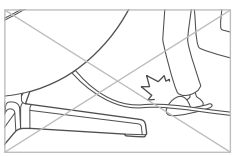

Be careful not to get your feet caught by the product and the power plug.

- There is a risk of bodily harm.

1. Safety information

⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


During use by general users



⚠
The shoulder position may not be correct depending on the user's height.




⚠
The recommended user weight is 100 kg or less.

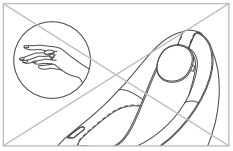

⚠
When using the product, remove accessories (bracelets, rings, watches, etc.) before use.

- There is a risk of bodily harm and accident.

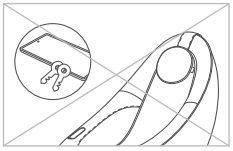


⚠
Empty your pockets (smartphone, wallet, keys, etc.) before using the product.

- There is a risk of bodily harm and accident.




⚠
Do not take in food or drink while using the product.

- There is a risk of bodily harm and accident.

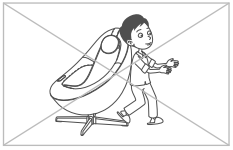


⚠
Do not lean on the massage chair.

- There is a risk of bodily harm and accident.

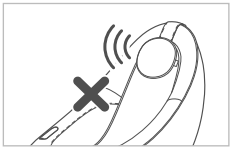

⚠
When using a Bluetooth speaker, do not use it with huge volume for a long time.

- It may cause hearing damage.

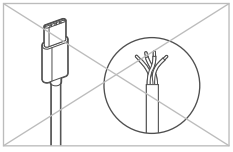

⚠
Use a shielded cable when charging using the USB charging terminal.


- It may cause electric shock, fire or failure.

* Shielded cable refers to a cable that is protected by wrapping aluminum foil around the wire or densely binding the wire with copper or steel in the form of a net to suppress noise coming from the outside/inside.

2. Part name

Adjust the headrest pad by hand.
You can recline or remove the headrest pad as needed.


Product exterior

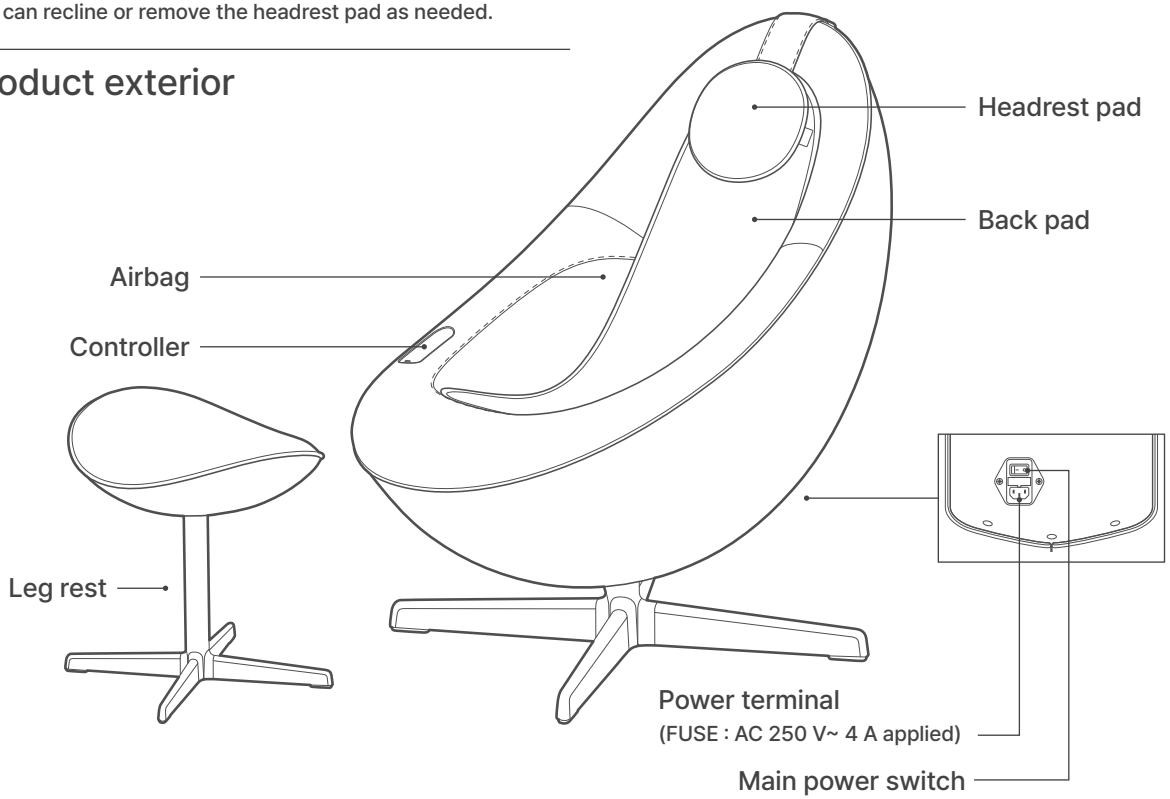


Other components



User Manual

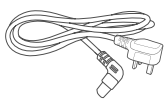

Power line

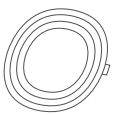

Cushion

3. Check before use

This product is for 220 - 240 V~, 50/60 Hz only. Be sure to connect the power plug to a grounded 220 - 240 V~, 50/60 Hz outlet.
The massage chair operates normally only if the power is connected.

⚠ Warning

Patients who shall not use the product and users who need prescriptions

- **The following patients shall not use the product:**

① Those who have been recognized as inappropriate to use the product by a doctor due to thrombosis, embolism, severe varicose vein, acute varicose vein, etc.
② Those who are suspected of acute cervical sprain (whiplash)
③ Those with sprain or symptom of sudden contraction and disconnection of sprain or muscle
④ Those who are in early pregnancy or immediately after childbirth
⑤ Those who have backbone (spine) abnormality due to an accident or disease in the past, or a person whose backbone is bent left and right
⑥ Those with severe osteoporosis
⑦ Those with acute intestinal disease, severe heart failure
⑧ Those with severe seizure symptoms or psychogenic diseases (perception disorder)
⑨ Those who use an implantable electronic medical device such as an implantable pacemaker
⑩ Those who have been recognized as having a loss of thermal sense due to a high degree of peripheral circulatory disturbance due to diabetes, etc.
⑪ Those who have or are concerned to have osteomyelitis
⑫ Those who have limited expression and body movement

- **The following people shall use the product after consulting a doctor.**

① Those who may have side effects due to the use of the product, such as pregnant women
② Those whose body temperatures are higher than normal due to acute inflammation and chill
③ Those who have with acute skin disease, malignant tumor, or other skin diseases
④ Those who receive medical treatment and need stability accordingly
⑤ Those who feel other body abnormalities

⚠ Precautions

Precautions before use

- If you have a disease for which you shall not use the product, check with your doctor as there is a concern about side effect caused by the use of the product.
- Check how to operate the product possible side effects.
- To use the product safely, start with a low-intensity massage.
- Check the location of the "Power" button before using the product.
- Check the duration of the massage session of the product.
- If the cover of the product is torn or peeled off, clothes or hair may get caught into the massage chair and cause accident. Check if there is any abnormality in the appearance of the product.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

Precautions during use

- If you feel any irritating pain or something wrong with your body, stop using the product immediately and see a doctor.
- Avoid direct skin contact with the heating part and motor moving part of the product.
- Monitor your usage time when performing a massage.
- When using the product, do not use it together with other vibrators or electric mats.
- More than 2 persons shall not use the product at the same time.
- Make sure not to damage the massage area of the product with accessories. (hair ornaments, necklaces, wristwatches, bracelets, rings, etc.)

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

Precautions when a failure occurs

If a problem with the product occurs, please do not disassemble the product at your discretion.
Additional product defects and accidents may occur.
Before you contact the Careline, check the user manual to take an action. If the problem is not solved, please contact the Careline for further assistance.

Precautions

Possible side effects when using the product

- **Be careful as the following side effects may occur due to the use of the product.**

① Abrasion, contusion, bruise, stab, cut, etc.
② Damage to muscles, tendons, nerves, spine and etc., due to excessive use and pressure of the product
③ Skin diseases and burns, etc.
④ Fracture and dislocation, sprain, etc.
⑤ Respiratory/digestive disorders and suffocation, etc.

Check before using the product.

- Check that there are no objects, people or pets around the product.
- Before use, check that the device operates normally by pressing all the switches according to this manual.

Coway Thailand is not responsible for the following:

- If you do not observe the use according to the user manual or failure to observe the precautions for use
- If a product is repaired or remodeled by a third party other than the Coway Careline, partner company, or designated engineer, thereby resulting in a failure or accident
- If a failure occurs due to natural disasters (fire, earthquake, flood, lightning, etc.)


Please keep this User Manual in a safe place.

When moving the product, do not arbitrarily move it and contact the Careline.

- It may cause damage such as scratch to the floor.

1. Controller and main functions

Controller

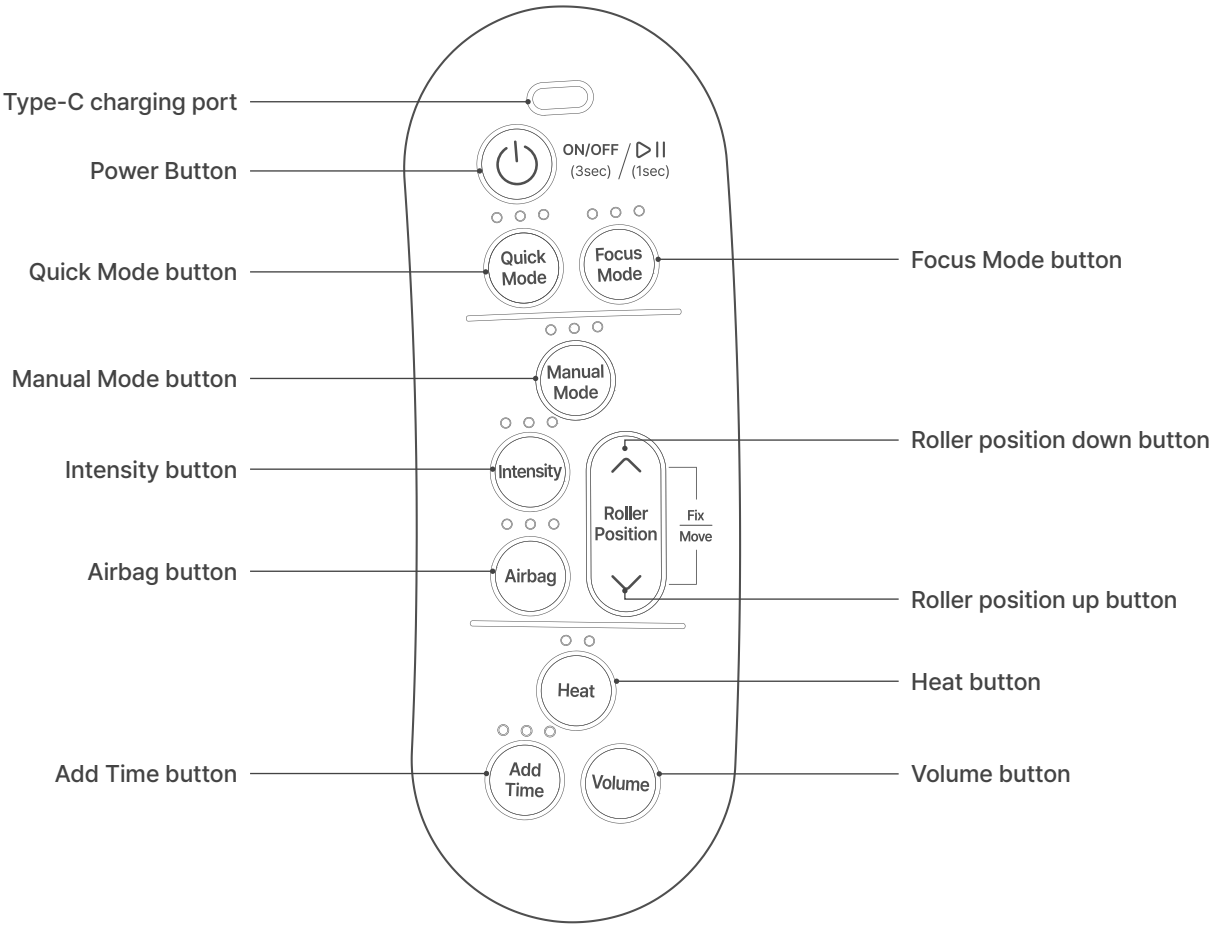


Controller




Power Button

- Press and hold the Power button for **about 3 seconds** to turn on or off the power of the massage chair. If you turn off the power, all functions are ended, and the chair and massage module return to their initial positions.
- To pause during massage operation, press the Power button for about 1 second. If you press the Power button for about 1 second in pause state, the massage operation is restarted.

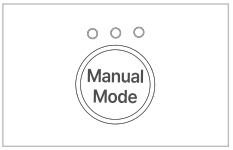

Manual Mode button

- Press the button to select a massage mode.
  - ● ○ ○ Tapping
  - ○ ● ○ Acupressure
  - ○ ○ ● Kneading
  - ● ● ● Mixed
  - ○ ● ● Rubbing

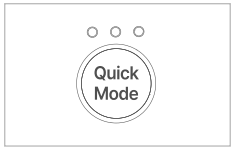


Quick Mode button

- Press the button to select 3 automatic massage modes.
  - ● ○ ○ Specialized 1 - Good morning course
  - ○ ● ○ Specialized 2 - Good day course
  - ○ ○ ● Specialized 3 - Good night course



Intensity button

- Press the button to select a massage intensity level.
- The initial intensity of the massage operation is level 1, and if you press the button, intensity level is selected in the order of 1 > 2 > 3 > 1.
  - ● ○ ○ Intensity 1
  - ● ● ○ Intensity 2
  - ● ● ● Intensity 3

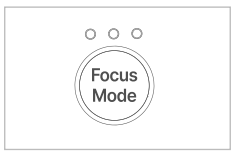

Focus Mode button

- Press the button to select 3 automatic massage modes.
  - ● ○ ○ Part 1 - Focus on neck & shoulders
  - ○ ● ○ Part 2 - Focus on back & waist
  - ○ ○ ● Part 3 - Focus on pelvis




Airbag button

- Press the button to select airbag intensity.
- The initial intensity of the airbag operation is level 1, and if you press the button, the intensity level is selected in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.
  - ● ○ ○ Intensity 1
  - ● ● ○ Intensity 2
  - ● ● ● Intensity 3
  - ○ ○ ○ OFF

1. Controller and main functions

Controller

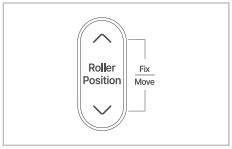

Roller Position up/down/Fix/ Move button


- You can 'move' or 'fix/cancel' the position of the massage roller.
- You can move the position of the massage roller by pressing the roller position 'Up' or 'Down' button, and you can fix the massage roller by pressing the 'Up' and 'Down' buttons at the same time.
- If you press the 'Up' and 'Down' buttons at the same time or change the massage mode while the massage roller is fixed, the massage roller fix is 'canceled'.



Add Time button

- Press the button to add massage time.
- The default massage time is 20 mins. Each press of the button will add 20 mins massage time. (Max 60 mins massage time).

● ○ ○ 20 minutes
● ● ○ 40 minutes
● ● ● 60 minutes

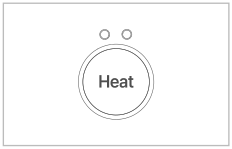

Heat button

- Turn on or off the power of the heating function.
- The initial state of the heating is OFF, and if you press the button, it operates in the order of level 1 > level 2 > OFF > level 1.

● ○ Level 1
● ● Level 2
○ ○ OFF

⚠ Caution:
There is a risk of burns if the heating function is used for a long time.




Volume button


- Press the button to adjust the volume.
- The initial volume is level 1, and if you press the button, the volume is operated in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.

2. How to use


01. Turn on the power.

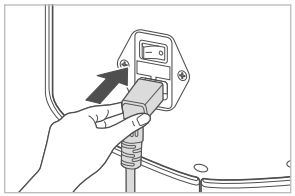

1. Insert the power plug in the massage chair.

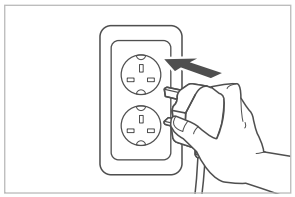


2. Insert the power plug into the outlet.

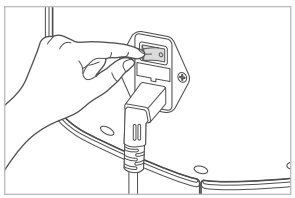

3. Turn on the main power switch on the back of the product.

2. How to use


01. Sit on the massage chair in an upright position.

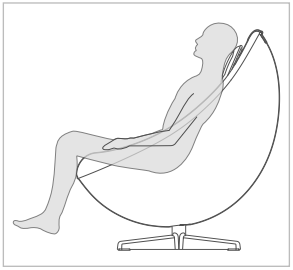

How to sit on a massage chair properly
Bring your buttocks and lower back as close as possible to the massage chair and sit on it.


- Do not forcibly get out of the massage chair while it is moving.
  This may apply the force to the product to cause a product failure and injury to the user.
- When using a Bluetooth speaker, set the volume appropriately. Loud volume may cause hearing loss.

02. Press the Power button on the controller

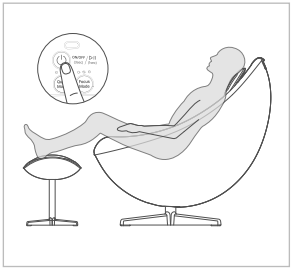

- If you press the power button for about 3 seconds, the power turns on. At this time, all LEDs except for the power LED blink twice.
- If you turn on the power, the power LED lights on in green and remains in standby mode.
- After this, if you press a massage mode you want, the power LED lights on in white, and the massage starts after the shoulders are detected.
- If the shoulders are not detected, the massage roller moves to the top and the massage starts.
- When you turn on the power, the massage rollers may move slightly.
- The type-C charging port can only be used when the power is turned on.


03. Adjusting the leg rest height

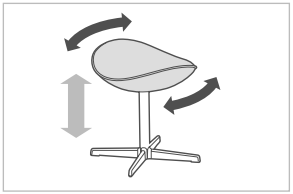

- Rotate the seat of the leg rest in both directions to adjust the height.

3. Massage mode selection

01. Quick Mode

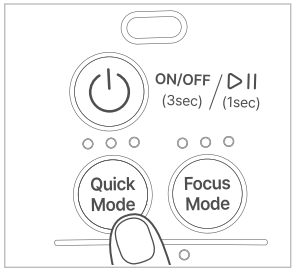


The Quick Mode operates automatically by combining massage modes such as massage and tapping with the air massage function. Press the Quick Mode button on the controller to select 3 courses.

- ● ○ ○ Specialized 1 - Good morning course
- ○ ● ○ Specialized 2 - Good day course
- ○ ○ ● Specialized 3 - Good night course

- If you press the button, the courses are selected in the order of Good morning > Good day > Good night > Good morning.
- In Quick Mode, it is operated in heating level 2. If you do not want to use the heating function, press the Heating button to turn off the heating function.

02. Focus Mode

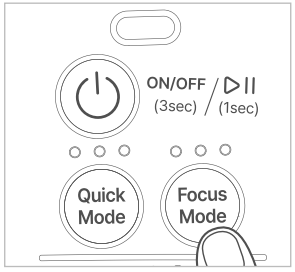


The Focus Mode massages a specific body area intensively by combining massage modes such as massage and tapping with the air massage function. Press the Focus Mode button on the controller to select 3 courses.

- ● ○ ○ Part 1 - Neck & shoulders
- ○ ● ○ Part 2 - Back & waist
- ○ ○ ● Part 3 - Pelvis

- If you press the button, the courses are selected in the order of Neck & shoulders > Back & waist > Pelvis > Neck & shoulders.

3. Massage mode selection

03. Manual Mode

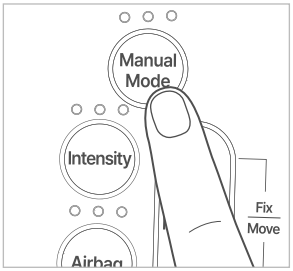

In the Manual Mode, the module moves up and down repeatedly and a user selects the massage mode manually. Press the Manual Mode button on the controller to select 5 courses.

- ● ○ ○ Tapping
- ○ ● ○ Acupressure
- ○ ○ ● Kneading
- ● ● ● Mixed
- ○ ● ● Rubbing

- If you press the button, the courses are selected in the order of Tapping > Acupressure > Kneading > Mixed > Rubbing > Tapping.

Body type analysis

- Turn on the power and analyze body shape upon initial operation.
- If you want a massage right away without body shape analysis, press and hold the Volume button for about 3 seconds while analyzing the body shape.


Pause/restart massage

- To pause during massage operation, press the Power button for about 1 second.
- If you press the Power button for about 1 second in pause state, the massage operation is restarted.
- When paused, the power LED blinks• The massage function ends after 10 minutes pause time.

End massage

- To end massage, press and hold the Power button for about 3 seconds.
- The maximum time for one massage is 60 minutes, and the power turns off automatically after 60 minutes.
- When the massage is ended, the massage module returns to its initial position.
- When the massage is ended, the power LED lights up in red.


04. Adjusting the massage intensity

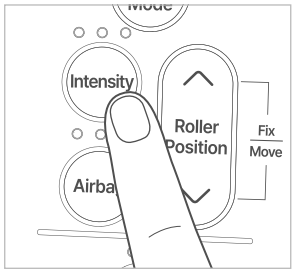

You can adjust the intensity of the massage roller.

- If you press the Intensity button on the controller, the intensity is selected in the order of 1 > 2 > 3 > 1.
- You can adjust the massage intensity during specialized massage, intensive body area message, or manual massage.


05. Adjusting the airbag intensity

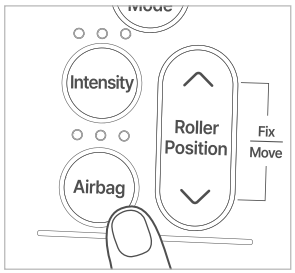

You can adjust the intensity level of airbag.
If you press the Airbag button on the controller, the intensity is selected in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.

- You can adjust the airbag intensity level during specialized massage and intensive body area message.


06. Adjusting the massage roller position

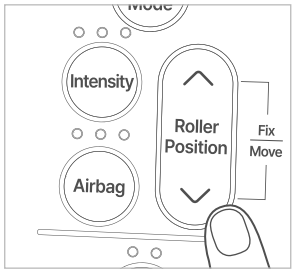

1. If you press the roller position up and down buttons simultaneously or press only one button during the massage operation, the ball position is fixed.
2. While pressing the roller position up button during intensive massage (massage roller fixed), the massage module moves upward.
3. While pressing the roller position down button during intensive massage (massage roller fixed), the massage module moves downward.
4. When the intensive massage operates in specialized massage or Focus Mode, the massage operation is repeated at the position.
5. When the intensive massage operates in Manual Mode, the selected manual mode is repeated at that position.
6. During intensive massage (massage roller fixed), press the roller position up and down buttons simultaneously to return to the previous massage mode.
7. If you enter a specialized massage or intensive body area message, the selected massage operate is operated and the massage roller is released.

4. How to use additional functions

07. Adding time

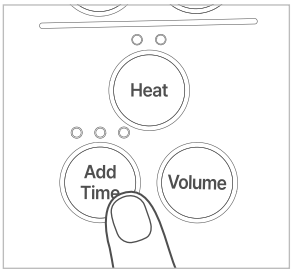


Press the Add Time button to add a massage time.
The default massage time is 20 mins. Each press on the button will add 20 mins massage time.

- ● ○ ○ 20 minutes
- ● ● ○ 40 minutes
- ● ● ● 60 minutes

• The maximum time for one massage is 60 minutes, and the power turns off automatically after 60 minutes.

08. Using the heat function

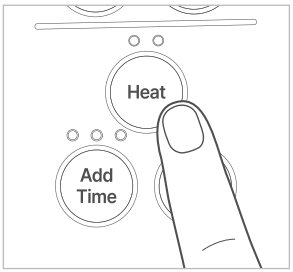


Turn on or off the power of the heat function.
If you press the Heat button, the function operates in the order of 1 > 2 > OFF > 1.

- ● ○ Heat 1
- ● ● Heat 2
- ○ ○ OFF

• In Quick Mode, it is operated in heat level 2. If you do not want to use the heat function, press the Heat button to turn off the heat function.


* Caution: There is a risk of burns if the heat function is used for a long time.

09. Setting the volume

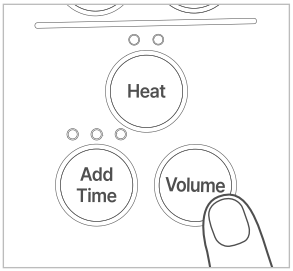


Adjust the volume level of voice guidance or turn it off.
If you press the Volume button, the volume operates in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.

10. Turning off the power

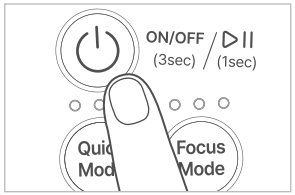

Press and hold the Power button on the controller for about 3 seconds.
Each part of the massage chair and the massage machine move to their initial position.
When the massage is ended, the power LED lights on in red.

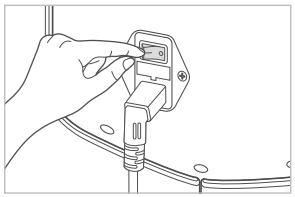

Turn off the main power switch on the back of the product.

11. Using a Bluetooth speaker


To use the speaker, connect the speaker to a smartphone, computer, etc. via Bluetooth.

- If you want to connect your device with the product via Bluetooth, please search 'TH_COWAY_MC-C01_000001 (serial number)'. (Password: 9999)
- If your device is already connected to another device, disconnect from that device to connect with the massage chair Bluetooth speaker.
- Bluetooth speakers may not be compatible with some device models.

1. How to clean

- Be sure to remove the power plug before cleaning.
- Do not immerse the product in water or spray water over it.
- Do not use organic solvents (thinner, etc.), bleach, or detergents containing chlorine or abrasives to clean the product.


How to clean the main body

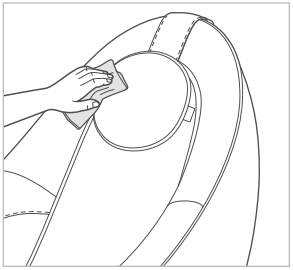

Wipe the exterior and cover of the product with a soft, dry cloth.

- When contaminated, wet a cloth slightly with water and wipe off the contaminant.
- Be sure to remove the remaining water.
- Do not wash the product cover in a washing machine. It may cause product damage.
- Do not iron the product cover with an iron. It may cause fire or product damage.

How to clean the controller

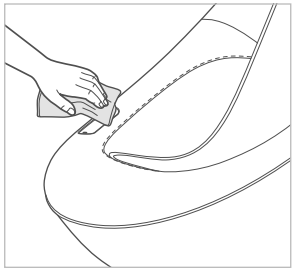

Wipe the controller with a soft, dry cloth.

- When contaminated, wet a cloth slightly with water and wipe off the contaminant.
- Be sure to remove the remaining water.
- Be careful not to allow foreign substances to enter the USB charging terminal.

1. Troubleshooting

Symptom	Check	Countermeasure
Noise is loud.	• Sound occurred while the air massage function is operating • Gear motor noise when the massage operates • Rattling noise when tapping • Rattling sound as the massage roller rub against each other	It is a sound occurred during normal product operation.
Power does not turn on.	The power switch on the back of the product does not turn on.	Turn on the power switch on the back.
	Poor contact with the power plug socket	Insert the power plug and socket correctly.
	Power plug broken	Contact the Careline.
	Poor connection of the power plug	Contact the Careline.
	The Power button on the controller has not been pressed.	Press the Power button on the controller.
The product stops suddenly during the massage.	Turn off the power switch on the back of the product, wait about 1 minute, and then turn on the power switch again. Press the Controller power button for 3 seconds to turn it on, and then press the Power button again for 3 seconds to check the product again.	If the power button is pressed after taking the necessary measures and the product still does not function properly, stop using the product, unplug the power plug, and contact the Careline.
	Regardless of the massage mode, the power is automatically turned off when the massage chair is used for 1 hour.	Press the power button to restart.
The massage roller stops suddenly during the massage.	Did you apply more force than necessary to the massage roller?	Please turn your body slightly. If the product operates normally, it is not a product failure. * If a user whose weight is 100 kg or more uses the product, be careful• This may happen.
The reclining function does not operate.	Check if there are any disturbance substances around the product.	Have enough space behind the backrest to lie down.
During operation, the massage roller gets caught in the inner cloth or bounces.	Friction between massage rollers and seat	This is not a malfunction because it is a temporary symptom caused by the massage rollers during message.
The airbag does not operate.	Check if the airbag intensity LED is turned on.	Check if the airbag intensity LED is turned on. The airbag operation is included in the massage operation, and the airbag does not operate immediately with the Airbag button.

2. Specification

Product name		Coway MC-C01 (Pebble) Massage Chair
Model name		MC-C01 (Pebble)
Rated voltage		220 - 240 V~, 50/60 Hz
Power consumption		77 W
Size	When erected	1 015 mm (W) X 735 mm (D) X 1 120 mm (H)
	When laid down	1 120 mm (W) X 735 mm (D) X 970 mm (H)
Weight		Product: 45.5 kg Leg rest: 4.5 kg
USB		DC 5 V 3 A
Distributor		COWAY (THAILAND) CO., LTD.

- There may be changes to the specifications to improve the product's performance.

3. Memo

3. Memo

coway

Massage Chair
MC-C01 (Pebble)
User Manual

COWAY (THAILAND) CO., LTD.